



Mezcladore En-Línea de Laboratorio

Verso

Capacidad

Rendimiento de autobombeo de hasta 1,500 litros por hora.

Sin paso alternativo

El producto no puede 'bypasear' el cabezal de trabajo de precisión del rotor/estator.

Cabezales de trabajo intercambiables

Configuraciones de fase simple y multifase estándar.

Materiales de construcción

Piezas de contacto en acero inoxidable 316L. Materiales especiales se pueden suministrar bajo pedido.

Motor

750W (1HP) 220 voltios, monofásico (110 voltios opcional), 50/60 Hz, Velocidad nominal máxima 8000 rpm (6000 rpm bajo plena carga).

Control electrónico de velocidad

Control de velocidad infinitamente variable con interruptor arranque/parada integrado.


Conexiones de entrada y salida

1/2" Tri-Clamp. Salida tangencial para autodrenaje.



Mezcladore En-Línea de Laboratorio

Verso

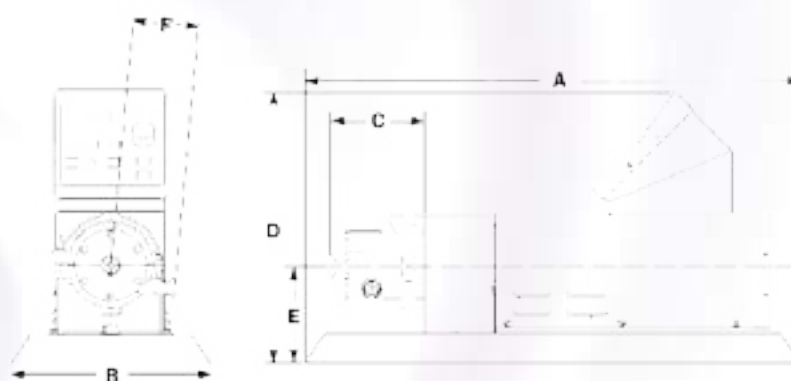

kW	R.P.M.	A	B	C	D	E	F
0.75	8000	600	200	118	345	127	81

Todas las dimensiones mostradas son en milímetros. Las dimensiones mostradas son solamente aproximadas y para propósitos de instalación solamente deberán usarse diagramas certificados. Silverson se reserva el derecho de cambiar las dimensiones y especificaciones sin previo aviso.